


# NOWY SYSTEM SUCHYCH CHUSTECZEK

do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni  
Incidin® Wipes + Dozownik

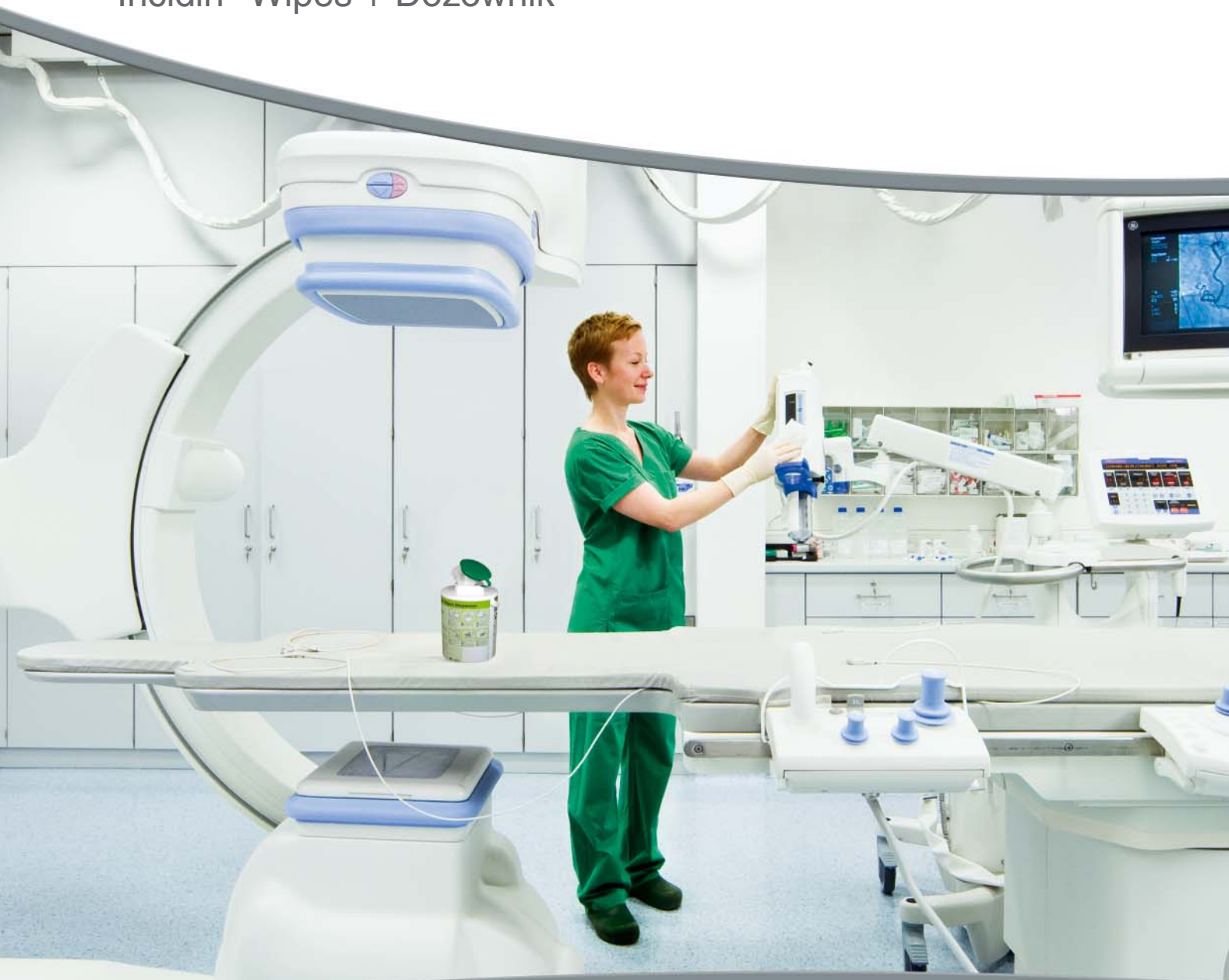

**ECOLAB®**

Everywhere It Matters.

# Nowy system suchych chusteczek

Do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni

System suchych chusteczek został opracowany, aby jeszcze bardziej ułatwić prace związane z dezynfekcją powierzchni.



System suchych chusteczek składa się z uniwersalnego dozownika oraz wysokiej jakości chusteczek o dwóch różnych gramaturach - Incidin® Premium i Incidin® Basic.

## ▲ Dozownik do systemu chusteczek Incidin®:

- Trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie chusteczek.
- Kompatybilny z produktami Ecolab, z palety do dezynfekcji powierzchni.
- Dostarczany wraz z wymiennym zamknięciem pozwalającym prawidłowo oznakować zawartość dozownika.

## ▲ Chusteczki Incidin® Premium:

- Wysokiej jakości, niskopyłowe o doskonałej wydajności mycia i niezawodności.
- Dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 99 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>.

## ▲ Chusteczki Incidin® Basic:

- Wysokiej jakości, niskopyłowe o doskonałej wydajności i niezawodności, łatwe w użyciu.
- Dostarczane w rolkach, jedna rolka zawiera 99 chusteczek o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>.

## DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

System suchych chusteczek został przetestowany w warunkach laboratoryjnych z każdym z niżej wymienionych produktów, aby zagwarantować użytkownikowi maksymalną skuteczność dezynfekcji powierzchni i bezpieczeństwo stosowania.

Celem uzyskania pewności, co do skuteczności dezynfekcji powierzchni i wobec braku standardowych metod (fazy II), przeprowadzono specjalny test nazwany testem 4-pól, gdzie w warunkach symulujących warunki praktyczne przeprowadzono badanie kontrolujące skuteczność dezynfekcji powierzchni z wykorzystaniem nasączonych chusteczek.

Jest to dodatkowy atut dla tego rozwiązania i potwierdzenie skuteczności dezynfekcji powierzchni. Badanie zostało przeprowadzone dla preparatów: Incidin® Plus, Incidin® Pro, Incidin® Rapid, Incidin® Extra N.

Jedna chusteczka Incidin® Basic lub Incidin® Premium nawilża powierzchnię o wielkości około 2 m<sup>2</sup>.

Suche chusteczki są również kompatybilne z produktami: Incidin® Liquid Spray i Incidin® Foam. Są dostosowane również do indywidualnych procedur mycia i dezynfekcji w każdej placówce.

Kompletny system suchych chusteczek



paleta produktów Ecolab



doskonały efekt mycia i dezynfekcji



# Przyjazny i uniwersalny

Doskonała tolerancja materiałowa

Wraz z nowym systemem suchych chusteczek użytkownik otrzymuje przyjazny i efektywny system wszechstronnego zastosowania, kompatybilny z produktami Ecolab.

## PRZYJAZNY I UNIWERSALNY

Wraz z nowym systemem suchych chusteczek użytkownik otrzymuje przyjazny i efektywny system wszechstronnego zastosowania z potwierdzoną skutecznością dezynfekcji z użyciem koncentratów firmy Ecolab. System jest również dostosowany do użycia z produktami gotowymi do użycia tj. niewymagającymi rozcieńczenia. Wszystkie koncentraty mogą być używane w różnych stężeniach dostosowanych do adekwatnego spektrum bójczonego. Należy zawsze przestrzegać informacji dotyczących zastosowania zawartych na etykiecie danego produktu.

## DOZOWNIK WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Napełnianie dozownika jest niezwykle proste przy użyciu systemu dozowania Ecolab: DG1 lub DG3. Dozownik można również napełniać ręcznie.


W celu ułatwienia pracy z produktem i aby uniknąć pomyłek, do opakowania chusteczek Incidin® Basic i Incidin® Premium dodawane są naklejki bezpieczeństwa

(informacyjne), których wypełnienie eliminuje możliwość złego zastosowania produktu. Należy naklejkę wypełnić podstawowymi informacjami dotyczącymi preparatu, którym nasączone są chusteczki (nazwa produktu, data napełnienia itp.) i nakleić na dozownik.

## SYSTEM KOLOROWYCH ZAMKNIĘĆ DLA ŁATWEGO OZNAKOWANIA PRZEZNACZENIA PRODUKTU

Z dozownikiem jest standardowo dostarczane zamknięcie w kolorze zielonym. Żółte, niebieskie, czerwone – można dokupić opcjonalnie. Za pomocą kolorowego systemu kodowania łatwo można odróżnić do czego przeznaczone są chusteczki oznakowane danym kolorem wieczka (zamknięcia).

Można również wymieniać same kolorowe kapsle bez ingerencji w całe zamknięcie.

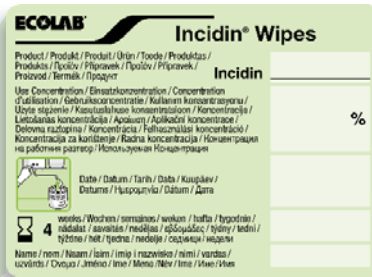

Naklejka bezpieczeństwa

## SPOSÓB UŻYCIA



Nalóż rękawice i zdejmij pokrywę. Przed napełnieniem dozownika wyczyść i wypłukaj dozownik z pozostałości po środku dezynfekcyjnym.



W rękawicach rozpakuj rolkę chusteczek i wyciągnij pierwszą chusteczkę ze środka rolki.




Umieść rolkę z chusteczkami w dozowniku.



Napełnij dozownik wybranym roztworem środka do dezynfekcji powierzchni o pożądanym stężeniu lub napełnij środkiem gotowym do użycia. Do napełnienia dozownika z chusteczkami Premium należy użyć min. 2,5 l roztworu roboczego, dla chusteczek Basic użyć min. 2,2 l roztworu roboczego.



Pierwszą chusteczkę przełóż przez otwór w pokrywie i zamknij dozownik – pokrywe. Dozownik pozostaw na 30 – 60 minut, aby wszystkie chusteczki zostały prawidłowo nasączone.

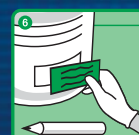

Nasączone chusteczki mogą być używane przez okres 28 dni. Wypełnij naklejkę bezpieczeństwa i naklej na dozownik.



# Dostępne opakowania

OPIS	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	SYMBOL
<b>SYSTEM SUCHYCH CHUSTECZEK</b>			
1 Dozownik do chusteczek Incidin®	1 szt.	1 szt.	10010283
2 Chusteczki Incidin® Premium	1 rolka x 99 chusteczek	6 szt.	10010279
3 Chusteczki Incidin® Basic	1 rolka x 99 chusteczek	6 szt.	10010278
4 Kolorowe zamknięcia do dozownika chusteczek Incidin®	3 zamknięcia (żółte, czerwone, niebieskie)	6 kompl.	10015889



System suchych chusteczek Incidin® może być stosowany z produktami innych producentów pod warunkiem potwierdzonej kompatybilności z systemem. Zawsze stosuj się do wskazówek wytwórcy danego środka dezynfekcyjnego.

## PRODUKTY ECOLAB DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM SUCHYCH CHUSTECZEK\*

Incidin® Plus	2 l	3 szt.	3054870
Incidin® Plus	6 l	1 szt.	3054920
Incidin® Pro	2 l	3 szt.	3076660
Incidin® Pro	6 l	1 szt.	3076750
Incidin® Extra N	2 l	3 szt.	3054800
Incidin® Extra N	6 l	1 szt.	3054850
Incidin® Rapid	6 l	1 szt.	3028700
Incidin® Liquid Spray	5 l	2 szt.	3041640
Incidin® Foam	5 l	2 szt.	3013440

\* Szczegółowe informacje dotyczące produktów ECOLAB są dostępne na stronach [www.ecolab.pl](http://www.ecolab.pl) lub u naszych konsultantów.

## ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW ECOLAB DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

PRODUKT	SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE (%)	CZAS DZIAŁANIA
Incidin® Plus	EN 13697 działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze warunki czyste i brudne	0,5	1 h
Incidin® Extra N		1,0	30 min.
		2,0	15 min.
Incidin® Rapid	EN 13697 działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze warunki czyste i brudne warunki czyste warunki brudne	0,25	1 h
		0,5	15 min.
		0,75	5 min.
		0,5	30 min.
		1,0	5 min.
Incidin® Liquid Spray	działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i prątkobójcze warunki czyste i brudne	gotowy do użycia	5 min.
Incidin® Foam	działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i prątkobójcze warunki czyste i brudne	gotowy do użycia	5 min.
Incidin® Pro	działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze warunki czyste i brudne	0,5	30 min.
		1,0	15 min.

Badania dotyczą roztworu wyciśniętego z chusteczki po upływie 4 tygodni.

**WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE STOSUJ BEZPIECZNIE. PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ I ETYKIETĄ PRODUKTU.**

Ecolab Europe GmbH  
Richtstrasse 7  
CH-8304 Wallisellen, Zurich

Ecolab Sp. z o.o.  
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków  
[www.ecolab.pl](http://www.ecolab.pl)

**ECOLAB®**